

第12章 使用手冊

「Dr.W 傷口管家」將系統分為訪客端與用戶端。訪客端僅可使用『傷口拍攝功能』，用戶端則全功能皆可以使用，以下將針對這兩個身分進行使用說明及介面展示。

● 訪客端

1. 訪客登入
2. 傷口診斷功能
 - (1) 新傷口拍攝
3. 診斷報告功能

● 用戶端

1. 註冊
2. 用戶登入
3. 首頁功能
 - (1) 護理小知識
 - (2) 當日護理提醒
4. 傷口診斷功能
 - (1) 新傷口拍攝
 - (2) 舊傷口追蹤
5. 診斷報告功能
 - (1) 編輯報告名稱
 - (2) 開啟護理提醒
 - (3) 護理步驟(文字/圖片顯示)
 - (4) 附近醫院提供
 - (5) 撰寫自我紀錄
 - (6) 精確癒合時間推估(使用條件：完成自我紀錄填寫)
 - (7) 儲存診斷報告
6. 紀錄冊功能
 - (1) 傷口類型分類
 - (2) 查看傷口診斷報告
 - (3) 傷口狀態更新
7. 護理提醒功能
 - (1) 編輯提醒時間
 - (2) 刪除護理提醒
8. 附近醫院功能
 - (1) 搜尋醫院
 - (2) 收藏醫院
9. 個人基本資料變更
 - (1) 個人習慣變更
 - (2) 特殊病症變更

表 12-1 訪客端-登入

訪客登入畫面	進入首頁
	

訪客可直接點擊『訪客登入』進入系統。

表 12-2 訪客端-傷口診斷功能說明

新傷口拍攝(只使用此功能)		
步驟 1. 點擊『傷口拍攝』	步驟 2. 選擇『新傷口拍攝』	步驟 3. 開始拍攝傷口
		
步驟 4. 完成拍攝，送出診斷	限制：『舊傷口追蹤』功能無法使用	
		

表 12-3 訪客端-診斷報告功能說明

診斷報告畫面	
	
訪客在診斷報告中，僅能看到傷口的『類型』、『癒合時間』、『護理建議』、『附近醫院』，四項資訊，無法使用提醒、紀錄、儲存的功能。	

表 12-4 用戶端-註冊說明

步驟 1. 點擊『註冊』按鈕	步驟 2. 同意免責聲明	步驟 3. 輸入『名稱』
		
步驟 4. 設定『帳號/密碼』	步驟 5. 選擇『出生年份』	步驟 6. 填寫『個人習慣』
		

步驟 7. 『特殊疾病』詢問

『有』→ 步驟 8

『沒有』→ 完成註冊

22:28 2.28 55% 2.28

請問您是否有特殊症狀嗎?

☒ 有 ☐ 沒有

↓ 『特殊症狀』 ↓

慢性病 (糖尿病、高血糖、高血脂等)
、癌症、愛滋病、貧血等。

➔

22:28 2.28 55% 2.28

請問您是否有特殊症狀嗎?

☐ 有 ☒ 沒有

✓

步驟 8. 『特殊症狀』選擇

點擊『▼』開始選擇

可『單選』或『多選』

點擊『打勾』完成註冊

11:57 2.28 55% 2.28

請問您有哪些症狀呢?

選擇症狀 ▼

✓

2:23 2.28 55% 2.28

請問您有哪些症狀呢?

選擇症狀 ▼

愛滋病 ×

選擇症狀

高血壓 高血脂 糖尿病 ✓ 愛滋病

壞血病 白血病 敗血病 血友病

貧血 肝病 腎病 癌症

靜脈功能不全 周邊動脈阻塞

2:24 2.28 55% 2.28

請問您有哪些症狀呢?

選擇症狀 ▼

愛滋病 ×

✓


表 12-5 用戶端-登入

用戶登入畫面	首頁畫面
	
用戶輸入帳號、密碼，點擊登入，成功後進入「Dr.W 傷口管家」首頁。	

12-6 用戶端-首頁功能說明

首頁畫面	功能 1：護理小知識	
		首頁上半區塊，即「護理小知識」。透過點擊小知識，跳轉至護理知識網站。
	功能 2：當日護理提醒	
		首頁下半區塊，即「當日護理提醒」。如果有當日需要換藥的傷口通知會顯示於此。

表 12-7 用戶端-傷口診斷功能說明

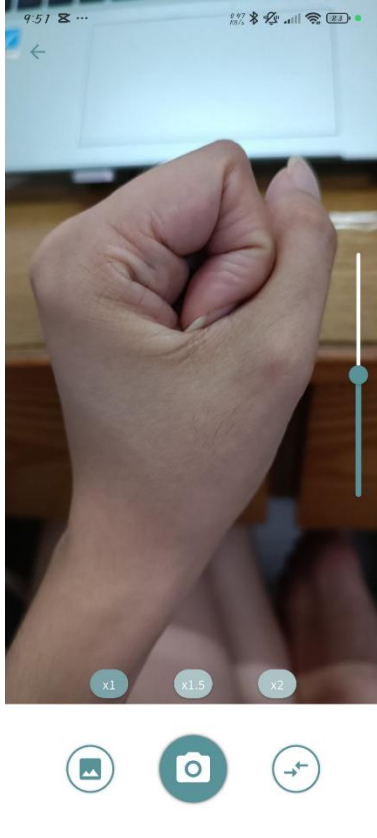功能 1：新傷口拍攝		
步驟 1. 點擊『傷口拍攝』	步驟 2. 選擇『新傷口拍攝』	步驟 3. 開始拍攝傷口
		
步驟 4. 完成拍攝，送出診斷	補充說明	
		開啟手機相簿，從中選擇照片進行診斷分析。
		翻轉鏡頭。

功能 2：舊傷口追蹤


步驟 1. 點擊『傷口拍攝』



步驟 2. 選擇『舊傷口追蹤』



步驟 3. 選擇要追蹤的傷口

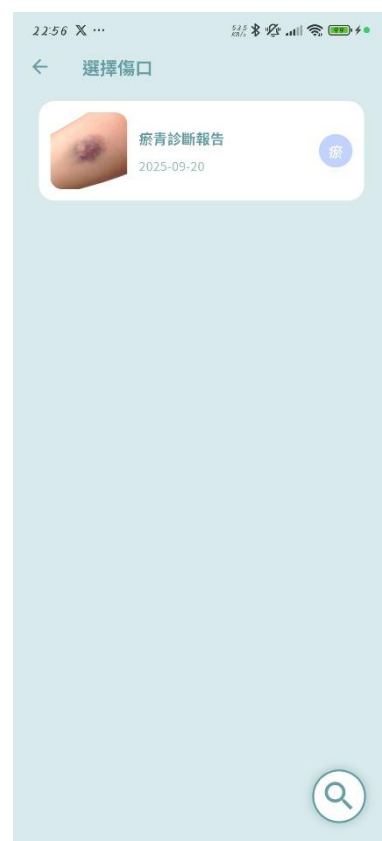

步驟 4. 點『打勾』選定傷口



額外功能-變更傷口狀態(癒合)

步驟 1. 點『愛心』變更狀態



步驟 2. 點『是的』改為癒合



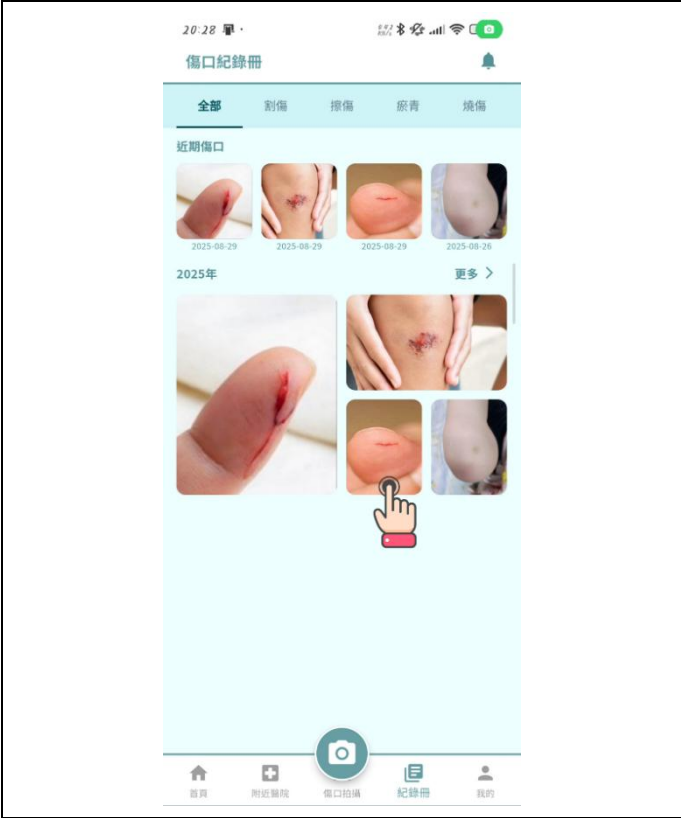
將傷口設定成『癒合』狀態，即關閉該傷口的追蹤功能。

表 12-8 用戶端-診斷報告功能說明

診斷報告畫面(上半部)	功能 1：編輯報告名稱	
	步驟 1：點擊『報告名稱』	步驟 2：輸入新的報告名稱
		
	透過編輯報告名稱，以提升後續傷口管理的方便性。	
	功能 2：開啟護理提醒	
	步驟 1：點擊『小鈴鐺』	步驟 2：選擇欲提醒時間
		
開啟護理提醒，避免用戶忘記換藥。		
	功能 3：護理步驟	
	文字顯示	圖片顯示
		
系統預設為『文字-護理步驟』，用戶可以透過每條建議後的『▼』，展開每條步驟的詳細說明。透過狀態切換的按鈕切換至『圖片-護理步驟』。		

診斷報告畫面(下半部)	功能 4：附近醫院提供	
附近相關醫療院所  臺北市立聯合醫院婦幼院區 地點：中正區福州街12號 距離：1.0 公里 步行時間：15 分鐘  郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 地點：中正區福州街14號 距離：1.0 公里 步行時間：16 分鐘  國立臺灣大學醫學院附設醫院 地點：中正區中山南路7號 距離：1.3 公里 步行時間：19 分鐘 自我紀錄 選擇標籤說明 詳細說明發生傷口狀態、造成原因、大小、深度，例如:由美工刀造成、大小約5公分、出血量不多 填寫自我紀錄，獲取更精準的癒合時間 不儲存報告 儲存報告	附近相關醫療院所  臺北市立聯合醫院婦幼院區 地點：中正區福州街12號 距離：1.0 公里 步行時間：15 分鐘  郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 地點：中正區福州街14號 距離：1.0 公里 步行時間：16 分鐘  國立臺灣大學醫學院附設醫院 地點：中正區中山南路7號 距離：1.3 公里 步行時間：19 分鐘	即時提供用戶目前所在位置範圍內最近的三間醫院，以利用用戶後續需求可以快速得到就醫資源。
	功能 5：撰寫自我紀錄 自我紀錄 右手 × 出血 × 疼痛 × 被紙劃到... 分析中...	功能 6：精確癒合時間推估 步驟 1：點擊『分析按鈕』 分析中...
		步驟 2：查看新癒合時間  傷口類型 割傷 預計5~7天癒合
	(功能 5)填寫自我紀錄，紀錄傷口當下的狀態、特徵以及發生情況。(功能 6)使用精確癒合時間推估，必須先撰寫『自我紀錄』，系統才能進行分析。	
功能 7：儲存診斷報告		
不儲存報告	儲存報告	
不儲存報告	儲存報告	
不儲存報告，系統直接跳回首頁；儲存報告，系統會將報告儲放於『紀錄冊』中。		

表 12-9 用戶端-紀錄冊功能說明

功能 1：傷口類型分類		
		
點擊上方的傷口分類，快速找到該種類的傷口。		
功能 2：查看傷口診斷報告		
步驟 1：點擊傷口照片	步驟 2：打開傷口報告	
		

功能 3：傷口狀態更新

步驟 1：點擊『已癒合』按鈕



步驟 2：點擊『是的』



步驟 3：狀態更新



表 12-10 用戶端-護理提醒功能說明

步驟 1：開啟護理提醒	功能 1：編輯提醒時間	
 今日換藥提醒 瘀青 14:30 換藥 首頁 附近醫院 傷口拍攝 紀錄冊 我的	步驟 2：點擊『編輯』按鈕	步驟 3：修改提醒時間
	 2:37 ← 護理提醒 拍攝日：2025-08-25 傷口類型：瘀青 換藥時間：2025-08-26 12:00 換藥頻率：每天	 2:37 ← 護理提醒 拍攝日：2025-08-25 傷口類型：瘀青 換藥頻率：每天 換藥時間：12:00
功能 2：刪除護理提醒		
	步驟 2：點擊『垃圾桶』按鈕	步驟 3：選擇要刪除的提醒
	 2:37 ← 護理提醒 拍攝日：2025-08-25 傷口類型：瘀青 換藥時間：2025-08-26 12:00 換藥頻率：每天	 2:38 ← 護理提醒 拍攝日：2025-08-25 傷口類型：瘀青 換藥時間：2025-08-26 14:30 換藥頻率：每天

表 12-11 用戶端-附近醫院功能說明

功能 1：搜尋醫院		
步驟 1：點擊『放大鏡』搜尋	步驟 2：設定篩選條件	步驟 3：查看該區域
		
功能 2：收藏醫院		
步驟 1：查看醫院資訊小卡	步驟 2：點擊『星星』收藏	步驟 3：可查看收藏列表
		

表 12-12 用戶端-個人基本資料變更


功能 1：個人習慣變更		
步驟 1：點擊『個人習慣』	步驟 2：顯示原設定	步驟 3：下方『頻率』可修改
		
步驟 4：上方『習慣』可切換	步驟 5：點擊『打勾』儲存	儲存成功
		

功能 2：特殊病症變更

步驟 1：點擊『特殊病症』



步驟 2：點擊『修改』按鈕

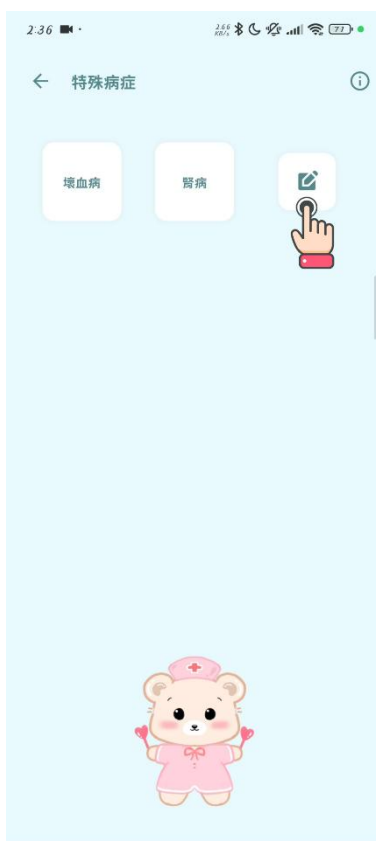

修改-刪除：點『綠底病症』



修改-添加：點『白底病症』



步驟 5：點擊『打勾』儲存



儲存成功

